


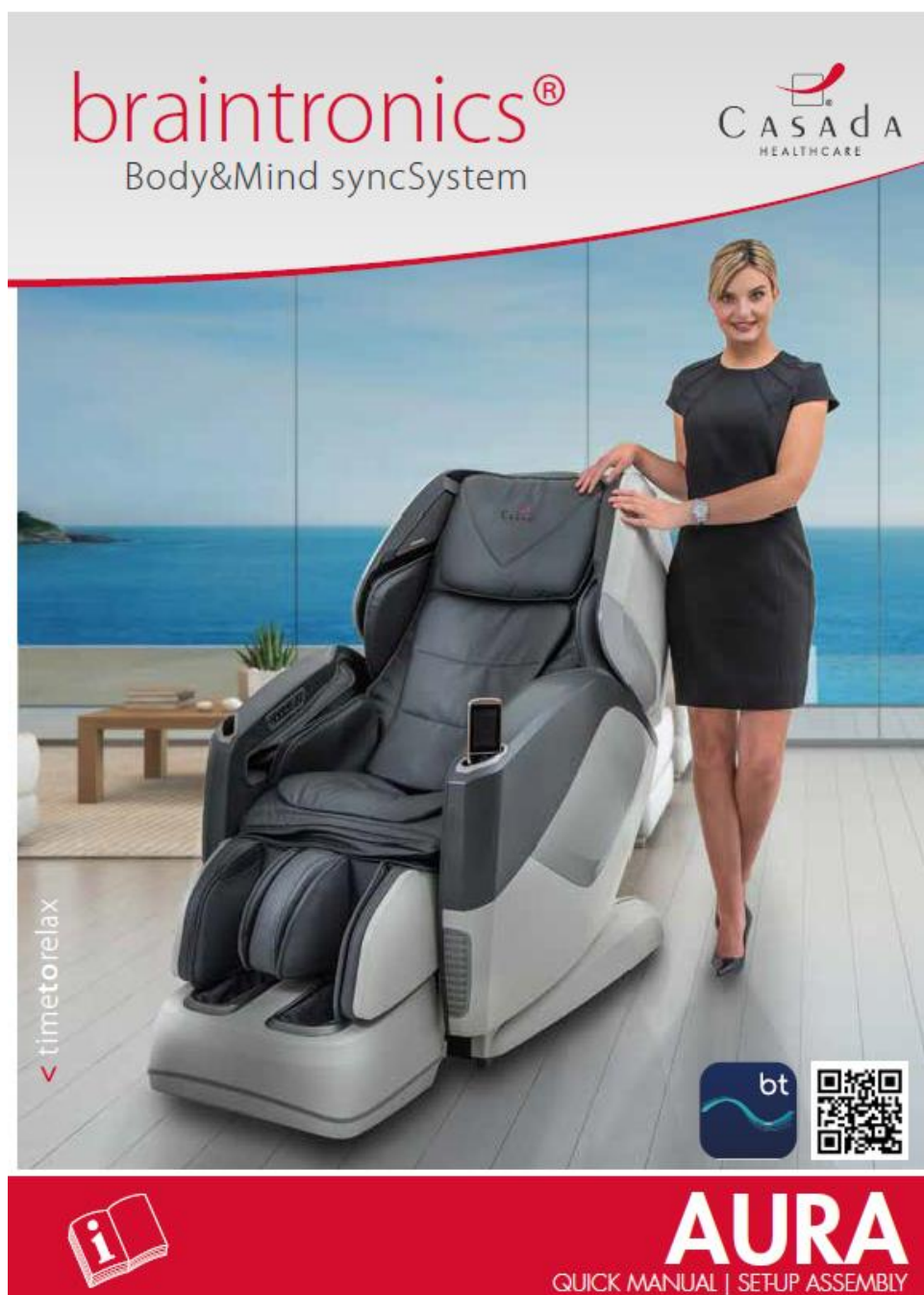

< e timpul să ne relaxăm

De când a fost înființată compania în anul 2000, numele CASADA a devenit sinonim cu produse de calitate superioară în sectorul wellness și fitness.

Azi, produsele CASADA sunt disponibile pe plan mondial. Produsele CASADA se caracterizează prin continua lor dezvoltare, design-ul inconfundabil și concentrarea lor absolută asupra îmbunătățirii calității vieții precum și calitatea lor durabilă și de primă clasă.

FELICITĂRI !

Prin achiziționarea acestui fotoliu de masaj ați demonstrat că aveți grijă de sănătatea dvs.

Pentru a putea beneficia de avantajele acestui dispozitiv de masaj pentru o perioadă lungă de timp, vă rugăm să citiți și să respectați toate instrucțiunile de siguranță.

Sperăm să vă bucurați pe deplin de fotoliul dvs. personal AURA.

CUPRINS

Instrucțiuni de siguranță	
Contraindicații	
Echipament Funcții	
Pregătire pentru utilizare	
Telecomandă	
Alcătuire și asamblare	
Curățare Întreținere Depozitare	
Depanare	
Date tehnice	
Declarație de conformitate UE	
Condiții de garanție	

INSTRUCȚIUNI DE SIGURANȚĂ



Vă rugăm să citiți următoarele instrucțiuni cu atenție înainte de a folosi fotoliul de masaj, pentru a vă asigura că funcționează corespunzător și are o eficiență optimă. Vă rugăm să rețineți aceste instrucțiuni de funcționare pentru utilizarea ulterioară!

- Acest fotoliu de masaj este conform cu principiile tehnologiei recunoscute și cu regulamentele actuale de siguranță.
- Fotoliul de masaj este dotat cu secțiuni încălzite. Persoanele care sunt sensibile la căldură trebuie să fie prudente înainte de utilizare (ICE 60335-2-32).
- Acest fotoliu nu necesită întreținere. Orice reparații necesare trebuie să fie efectuate numai de personal calificat autorizat.
- Utilizarea necorespunzătoare și reparațiile neautorizate sunt interzise din motive de siguranță și duc la pierderea garanției.
- Pentru a evita accidentarea, vă rugăm să nu introduceți degetele între rolele de masaj
- Nu atingeți niciodată ștecherul cu mâini umede.
- Nu permiteți contactul fotoliului de masaj cu apa, temperaturile ridicate și expunerea directă la lumina soarelui.
- Nu utilizați fotoliul de masaj într-un mediu cu umiditate ridicată a aerului, ca de ex. în baie
- Vă rugăm să nu utilizați fotoliul de masaj dacă acesta se află undeva unde nu este suficient spațiu sau într-un spațiu unde ventilatoarele sunt acoperite și nu se asigură un flux de aer curat
- Asigurați-vă că deconectați fotoliul de masaj de la sursa de alimentare dacă nu este utilizat o perioadă mai lungă de timp, pentru a elimina riscul de scurtcircuit.
- Nu utilizați cabluri, ștechere deteriorate sau prize desfăcute.
- Dacă există cabluri/ștechere deteriorate trebuie înlocuite de producător, reprezentantul de service sau de personal calificat.
- În caz de defecțiune, deconectați fotoliul imediat de la sursa de alimentare.
- Compania nu acceptă răspunderea pentru orice daune rezultate din utilizarea greșită sau incorectă a acestuia.

- Pentru a preveni efortul excesiv asupra mușchilor și nervilor, nu ar trebui să depășiți durata recomandată de masaj de 30 de minute
- Pentru a evita deteriorarea fotoliului nu utilizați niciodată obiecte ascuțite sau cu vârf.
- Pentru a minimiza riscul de scurtcircuit sau incendiu, trebuie să utilizați neapărat prize potrivite pentru ștecher și să vă asigurați că ștecherul este introdus complet în priză.
- După utilizare și înainte de curățare, deconectați neapărat fotoliul dumneavoastră de masaj de la sursa de alimentare.
- Curățarea și întreținerea nu poate fi efectuată de către copiii sub 14 ani fără supraveghere.
- Dacă în timpul utilizării are loc o pană de curent imprevizibilă, comutați imediat întrerupătorul în poziția OFF (închidere) și scoateți ștecherul din priză, pentru a evita deteriorări la fotoliul dumneavoastră de masaj.
- Dacă există cabluri electrice umede sau deteriorate nu utilizați fotoliul de masaj.
- În cazul în care copiii sub 14 ani, oamenii cu dizabilități sau persoanele fragile folosesc acest fotoliu de masaj, acestea trebuie neapărat monitorizate.
- Nu utilizați fotoliul de masaj imediat după ce ați luat masa sau sub influența alcoolului,
- Utilizați produsul doar în scopul descris în manualul de utilizare.
- Vă rugăm să utilizați doare accesoriile oferite de furnizor
- Vă rugăm să nu stați în picioare sau în șezut sau să săriți pe suporturile pentru picioare, pentru a evita deteriorările.
- Pentru a evita pagubele sau să vă răniți, nu încercați să stați pe suportul pentru brațe sau pe spătar.
- Vă rugăm să păstrați fotoliul dumneavoastră de masaj întotdeauna curat și evitați pătrunderea de corpuri străine în pliurile fotoliului de masaj.
- Vă rugăm să nu trageți direct de cablul de alimentare al fotoliului de masaj.
- Vă rugăm ca în cazul reglării suporturilor pentru picioare sau a spătarului să vă asigurați că nu se găsește niciun alt obiect dedesubt, în special în cazul copiilor sub 14 ani.
- Produsul este destinat exclusiv pentru utilizarea la domiciliu.
- În cazul deteriorării cablului de alimentare flexibil, la înlocuire, trebuie să se achiziționeze un cablu flexibil destinat pentru același scop sau altul similar de la producător sau de la punctul de service

Contraindicații

În cazul în care nu sunteți sigur dacă aveți voie să utilizați fotoliul de masaj, consultați în orice caz medicul dvs.

- Se interzice utilizarea fotoliului de masaj în timpul sarcinii sau în cazul uneia/ mai multora din următoarele afecțiuni: Răni recente, boli trombotice, orice fel de inflamații și umflături, precum și cancer. Dacă sunteți sub tratament pentru boli sau afecțiuni, înainte de masaj se recomandă să cereți sfatul medicului dvs.
- Persoanele cu dizabilități fizice, cognitive sau psihice sau persoanele fără experiență și cunoștințe, pot utiliza acest fotoliu de masaj doar cu supraveghere și îndrumare de către persoana responsabilă pentru siguranța acestora.
- Pentru a evita inconveniențele sau riscurile cauzate de utilizarea fotoliului de masaj, rugăm următoarele persoane ca înainte de utilizare, să consulte medicul:

- Persoanele aflate la pat
- Persoanele aflate sub tratament medical
- Persoanele cu probleme de spate, persoanele cu probleme ale coloanei vertebrale sau deviații ale acesteia
- Persoanele cu stimulator cardiac.
- În caz de durere apărută în timpul masajului, vă rugăm să opriți imediat utilizarea.
- În cazul în care vă răniți în timpul utilizării, vă rugăm să solicitați imediat ajutor medical.
- Nu masați zonele de pe piele înroșite, inflamate sau umflate.
- Acest fotoliul de masaj servește doar pentru masaj wellness la domiciliu, nu reprezintă un produs de masaj medical și de aceea nu poate înlocui tratamentul medical specializat.
- Vă recomandăm o utilizare zilnică a fotoliului de masaj de 30 de minute. Zonele individuale ale corpului trebuie masate maxim 15 minute într-o sesiune, pentru a nu apărea efecte adverse din cauza masajului excesiv.
- Acest produs nu se recomandă pentru copiii sub 14 ani.
- Copiii sub 14 ani trebuie supravegheați. Asigurați-vă că aceștia nu utilizează fotoliul de masaj pentru a se juca.

CONTRAINDICAȚII PENTRU "BRAINTRONICS "

- Psihoze (de ex. schizofrenie, tulburare bipolară, depresii endogene)
- Tulburări de personalitate
- Epilepsie și alte boli similare manifestate prin crize
- Boli cardiace
- Boli ale sistemului nervos central
- Tromboză
- Depresii endogene
- ADHD (inactiv)
- Infarct cardiac recent sau accident vascular cerebral
- Dizabilitate mentală
- Boli legate de dependența de droguri, alcool și dependență de medicamente
- Administrarea regulată a medicamentelor psihotrope
- Sarcină


NOTĂ: Din motive etice și legale, braintronics nu trebuie utilizat la copii și tineri fără aprobarea expresă a reprezentantului legal. Persoanele care prin meditație pot ajunge la conflicte referitoare la credință, trebuie să renunțe la utilizarea aparatului.

Câmpuri electromagnetice (CEM)

Acest produs Casada este conform tuturor standardelor privind câmpurile electromagnetice (CEM). Dacă este manevrat în mod corespunzător conform instrucțiunilor din acest manual de utilizare, produsul este sigur pentru a fi utilizat pe baza dovezilor științifice disponibile actualmente.

ECHIPAMENT – FUNCȚII


1. Pernă de cap
2. Difuzor Bluetooth
3. Pernă spătar
4. Acces rapid de la distanță
5. Pernă șezut
6. Masaj la umăr
7. Logo LED Braintronics®
8. Braț fotoliu
9. Telecomandă
10. Panou lateral
11. Suport pentru picioare

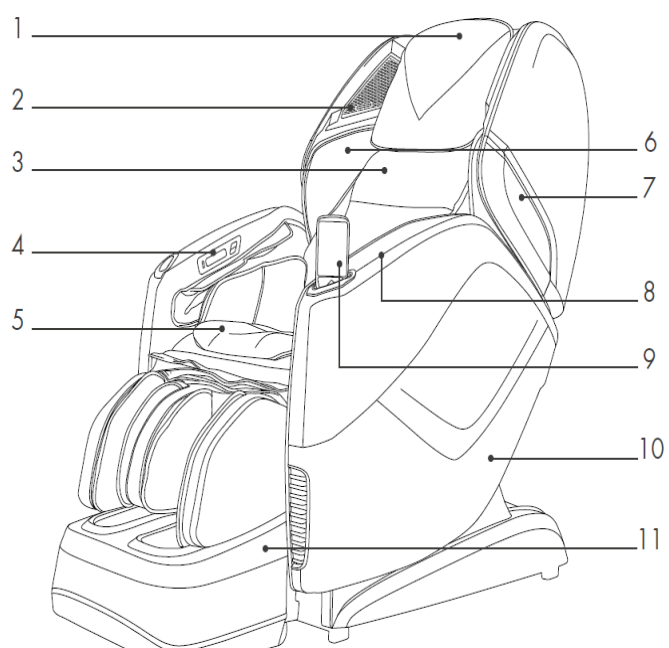


2 perne de aer

12 perne de aer

6 perne de aer

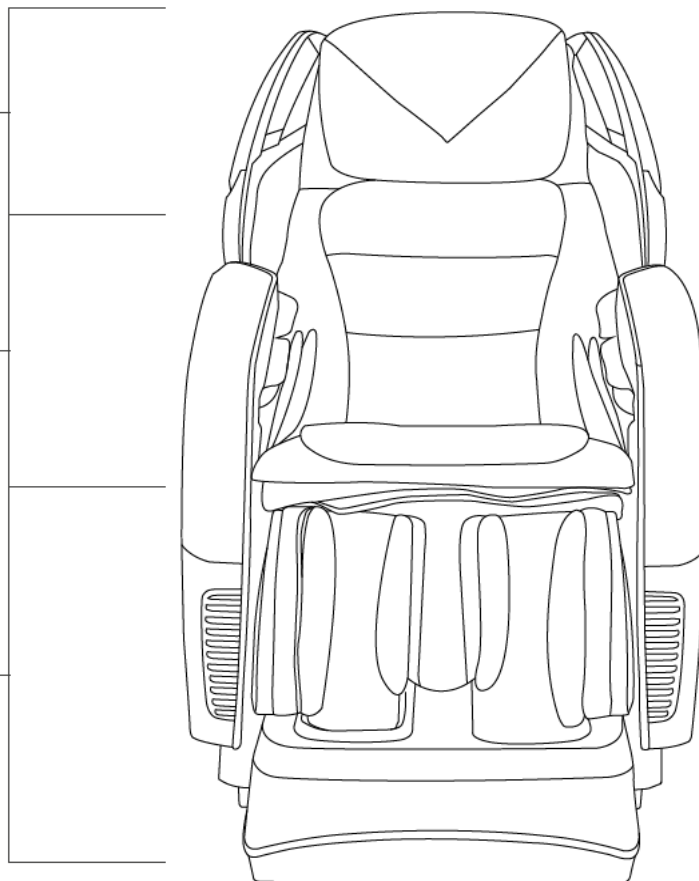

PREGĂTIRE PENTRU UTILIZARE

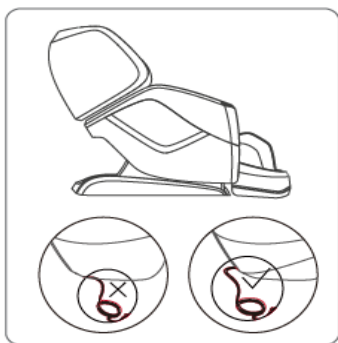


1. Plasați fotoliul într-un spațiu deschis

- Lăsați suficient spațiu în jurul fotoliului pentru a-l putea înclina
- Pentru a evita deteriorarea pardoselii și pentru a reduce zgomotul, vă rugăm să puneți un covoraș sub fotoliu
- Asigurați-vă că nu există nici o barieră în fața sau spatele fotoliului
- Vă rugăm nu puneți fotoliul pe o suprafață umedă sau inegală
- Pentru a evita interferențe de semnal, plasați fotoliul la 1 m distanță de orice televizor sau radio
- Nu expuneți fotoliul la lumina directă a soarelui sau la temperaturi înalte. Altfel materialul său de piele se poate decolora sau întări

Atenționare!

Nu puneți cablul de alimentare sub fotoliu! Aveți grijă să nu deteriorați cablul!

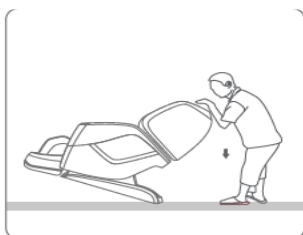

2. Mutați fotoliul

- După cum se vede în imagine, împingeți spătarul în jos și înclinați fotoliul pe rotițe la un unghi de 45°
- Împingeți ușor și mutați fotoliul la locul dorit
- Lăsați în jos ușor fotoliul până este complet aliniat la sol

Atenționare!

- Înainte de a muta fotoliul, reglați spătarul la poziția sa originală
- Nu mutați fotoliul dacă este ocupat sau în funcționare
- Mutarea fotoliului poate deteriora pardoseala. Se recomandă protejarea pardoselii (ex. covor sau preș)
- În timpul mutării nu scăpați fotoliul și nici nu-l lăsați jos dintr-o dată, deoarece ar putea deteriora fotoliul
- Se recomandă două persoane la mutarea fotoliului sau mai multe dacă e necesar

TELECOMANDĂ

BUTON PORNIT/OPRIT

ECRAN TACTIL (PAGINA PRINCIPALĂ DE OPERARE)

TASTE TACTILE



Telecomanda ecranului tactil

1. Buton pornit/oprit (în partea de sus a telecomenzii)

- Apăsați această tastă pentru a porni fotoliul de masaj. Spătarul și suportul de picioare se reglează automat la unghiul implicit. Se afișează ecranul principal de operare.
- Apăsați această tastă din nou. Masajul se oprește. Mecanismul de masaj, spătarul și suportul de picioare revin la poziția inițială. Fotoliul de masaj este oprit.

2. Pagina principală de operare

Există 6 funcții de masaj disponibile:

- Gât/umăr
- Partea lombară
- Automat
- Manual
- Avansat
- Masaj cu perne de aer


Setări:

Afișat în partea de sus colțul drept al ecranului principal de operare

TASTE TACTILE

Pagina principală: Apăsați pentru a reveni la pagina principală de operare

Apăsați pentru a regla unghiurile fotoliului de masaj și poziția Gravitare Zero.

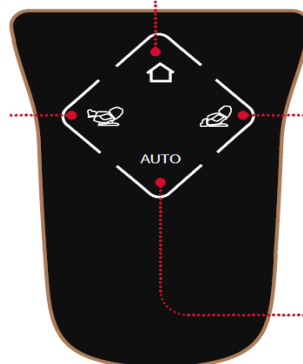


Restabilire: Apăsați pentru a restabili fotoliul de masaj la poziția sa inițială

AUTOMAT: Apăsați pe funcția de masaj „Auto” (Masaj „Demo” implicit)

ALCĂTUIRE ȘI ASAMBLARE

1) VĂ RUGĂM SĂ DESFACEȚI AMBALAJUL ȘI SĂ SCOATEȚI PIESELE

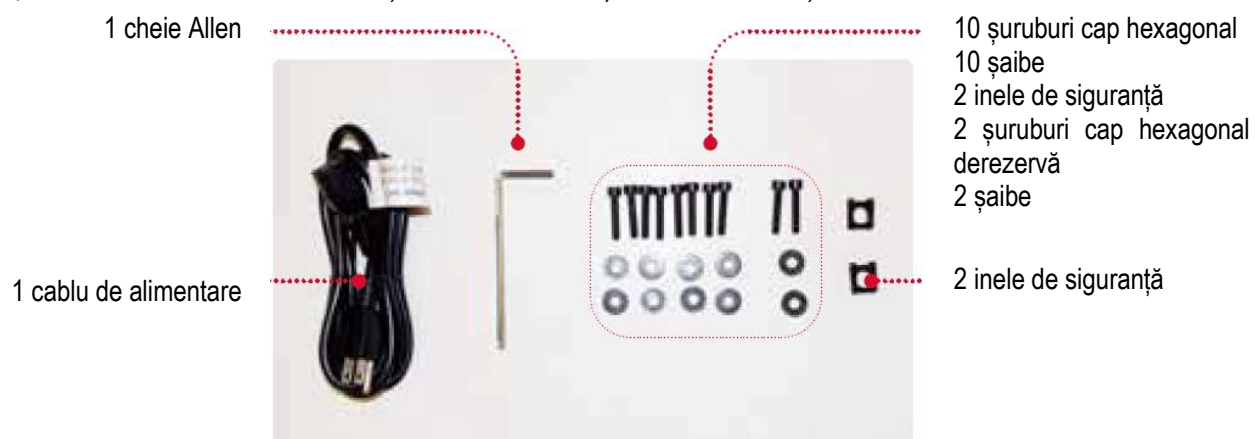

Fotoliu de masaj



Suport de picioare



Panou partea stânga



Panou partea dreaptă

1.1 | Scoateți capacul panoului lateral trăgând ușor de banda din material pentru a pregăti montarea.



Bandă din material Capac panou lateral

1.2 | Conectați la rețeaua de alimentare și porniți aparatul pentru ca fotoliul să revină la poziția inițială.




2) INSTALAȚI SUPORTUL DE PICIOARE

Conectați cablul suportului de picioare și tubul de aer.



2.1 | Agățați suportul de picioare la baza locului de șezut, apoi fixați-l cu închizătoarea

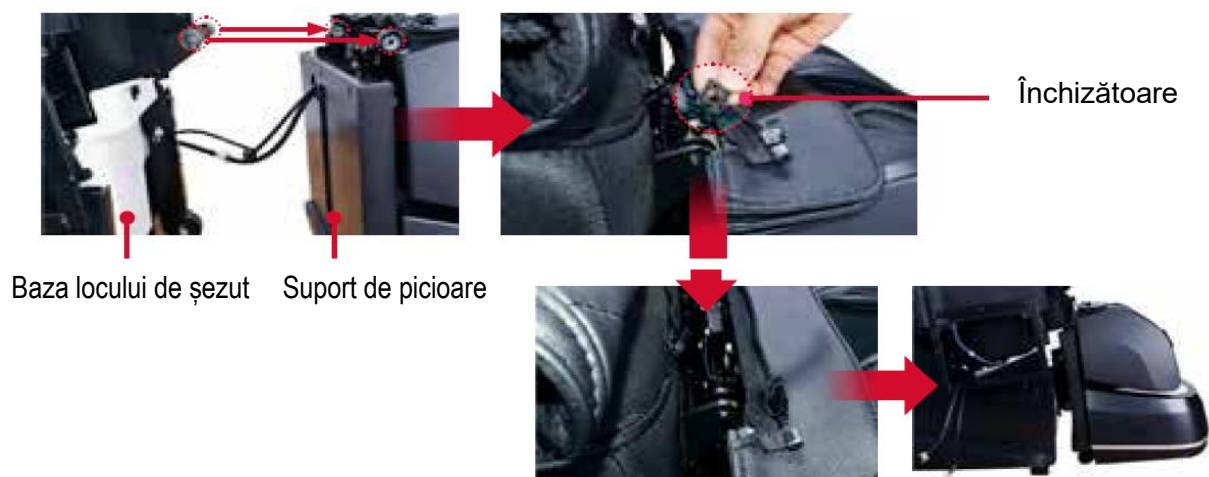


3) INSTALAȚI PANOURILE LATERALE

Aliniați panoul lateral A cu unitatea principală B. apoi inserați panoul lateral în unitatea principală.



3.1 | Cablul și tubul de aer trebuie să treacă prin deschiderea conductelor lor și conectate la respectivele lor părți.

Introduceți firele prin această gaură

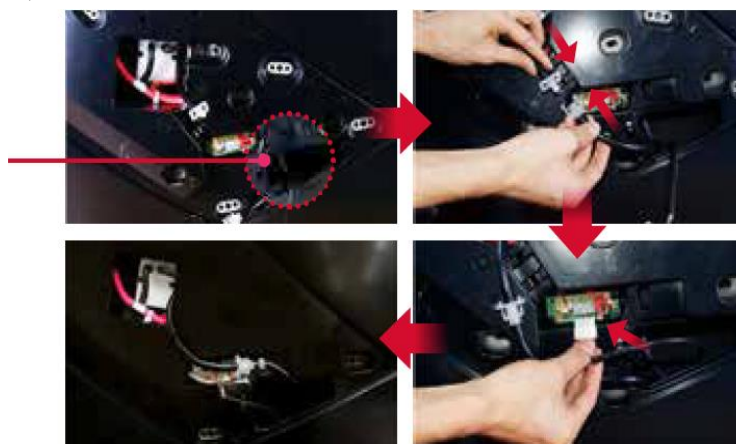

3.2 | Utilizați patru șuruburi pentru a fixa panoul lateral.



3.3 | Pentru a reatașa panoul lateral, loviți cu mâna marginile capacului panoului lateral



4) INSTALAREA PERNEI DE ȘEZUT

Fixați fermoarul între locul de șezut și suportul de picioare.



4.1 | Perna de șezut este fixată cu un fermoar pe stânga și pe dreapta.



4.2 | Fixați perna de șezut la spătar folosind banda velcro.

CURĂȚARE | ÎNTREȚINERE | DEPOZITARE

A | CURĂȚAREA PIELII SINTETICE

Ștergeți pielea sintetică cu un material moale și uscat. Nu curățați fotoliul cu soluții care conțin substanțe chimice, cum ar fi diluanți, benzină sau alcool. Asigurați-vă că detergentul de curățat nu va afecta pielea sintetică prin citirea etichetei. În cazul în care pielea sintetică este foarte murdară, ștergeți-o prin metoda de mai jos.

1. Umeziți o cârpă moale în apă caldă sau într-un detergent neutru standard și stoarceți-o.
 2. Asigurați-vă că este bine stoarsă până când NU se mai scurge apă din ea.
 3. Ștergeți suprafața pielii sintetice cu cârpa moale.
 4. Clătiți cârpa de mai multe ori atunci când ștergeți fotoliul.
 5. Lăsați pielea sintetică să se usuce în mod natural. Nu folosiți uscător
- Suprafața pielii sintetice se poate estompa sau decolora dacă se utilizează un detergent neadecvat. Testați soluția de curățare pe porțiuni mici înainte de a o aplica peste tot.
 - Curățarea pielii sintetice cu orice agent pe bază de alcool, diluant sau benzină poate provoca decolorarea sau îndepărtarea totală a culorii

B | CURĂȚAREA PIESELOR DIN PLASTIC

1. Puneți o cârpă moale în apă caldă amestecată cu un detergent neutru, stoarceți-o și ștergeți piesele din plastic.
2. Nu curățați piesele din plastic cu substanțe chimice, cum ar fi diluanți, benzină și alcool.
3. Ștergeți cu un material din microfibră sau moale, stors în apă curată.
4. Lăsați piesele din plastic să se usuce în mod natural

C | DEPOZITARE

- Dacă fotoliul nu este utilizat pentru o perioadă mai lungă de timp, cablul de alimentare trebuie înfășurat, iar fotoliul trebuie să fie depozitat într-un mediu uscat.
- Nu depozitați niciodată fotoliul la temperaturi ridicate sau în apropierea focului deschis. Evitați expunerea prelungită la lumina soarelui.
- Vă rugăm să folosiți pentru curățare numai produse de îngrijire a pielii artificiale disponibile în comerț. Nu curățați cu diluant, benzen sau alcool în orice moment.
- Dacă fotoliul se află pe o suprafață neuniformă, nu îl rostogoliți sau împingeți; ridicați-l pentru a-l deplasa.
- Vă rugăm să faceți pauze după fiecare utilizare și să nu folosiți fotoliul de mai multe ori fără pauză

DEPANARE

DEFECT

- În timpul funcționării se aude zgomotul motorului
- Telecomanda nu funcționează corect
- Aparatul nu mai funcționează.
- Programele automate Braintronics nu pornesc.

EXPLICAȚIE

- Este un zgomot normal în timpul funcționării.
- Asigurați-vă că ștecherul este introdus corect în priză și comutatorul principal a fost pornit. Verificați cablul telecomenzii.
- După ce ajunge la perioada de funcționare presetată sau după o durată de utilizare prea mare, fotoliul se oprește în mod automat. Astfel se asigură o durată de viață mai mare a fotoliului.
- Asigurați-vă că aplicația braintronics este instalată și contul dvs. este activat. Verificați și existența conexiunii Bluetooth® dintre smartphone-ul dvs. și fotoliul de masaj.

DATE TEHNICE

Dimensiuni:	vertical 155(L) x 81(l) x 143(H) cm încălinat 202(L) x 81(l) x 119(H)cm
Greutate:	111 kg
Capacitate maximă	120 kg
Tensiune:	AC 220-240 V - 50~60 Hz
Putere nominală:	250W
Durată de funcționare	15 minute
Braintronics	21 minute
Certificate:	    

DECLARAȚIE DE CONFORMITATE UE

Aparatul este conform Directivelor Europene EMC 2014/30/UE (compatibilitate electromagnetică) și LVD 2014/35/UE (joasă tensiune).

CONDIȚII DE GARANȚIE

Comerciantul garantează o perioadă de garanție legală pentru produsul descris pe verso. Garanția se aplică de la data achiziționării. Data achiziției se demonstrează cu documentul de cumpărare. Comerciantul va repara sau înlocui gratuit produsele care sunt înregistrate în Germania la care s-a constatat un defect. Acest lucru nu include părțile supuse uzurii cum ar fi husele din materiale. Pentru aceasta trebuie să returnați aparatul defect împreună cu dovada de cumpărare înainte de expirarea perioadei de garanție.

Cererea de garanție nu se va aplica dacă se stabilește că defectul a fost cauzat de ex. de influențe externe sau ca rezultat al unei reparații sau modificări care nu a fost efectuată de producător sau de un dealer autorizat. Garanția din partea comerciantului este limitată la repararea sau schimbarea produsului. În cadrul acestei garanții, producătorul sau comerciantul nu-și va asuma nici o răspundere ulterioară și nu e responsabil de daunele ivite ca rezultat al neconformității cu instrucțiunile de utilizare și/sau utilizarea necorespunzătoare a produsului.

Dacă la inspecția produsului de către producător se constată că cererea de garanție nu se referă la un defect acoperit de garanție sau că perioada de garanție a expirat, costurile de inspecție și reparație sunt suportate de client.

Notificare legală: Nimic din conținutul manualului nu are valoare de vindecare. Diagnosticul și tratamentul bolilor și altor afecțiuni fizice necesită tratament din partea unui doctor, medic de terapie alternativă sau terapeut. Declarațiile sunt exclusiv informative și nu trebuie utilizate ca înlocuitor al tratamentului medical profesional. Fiecare utilizator este instruit să-și evalueze cu grijă situația și, unde e cazul, să consulte un medic specialist pentru a determina dacă aplicarea aparatului este potrivită în cazul său specific. Fiecare utilizare sau terapie este efectuată pe riscul utilizatorului. Ne disociem de orice angajamente sau proprietăți de vindecare.

Casada International GmbH
Obermeiers Feld 3
33104 Paderborn
Germania
info@casada.com
www.casada.com

Imaginile și textele copyright se supun drepturilor de autor ale Casada International GmbH și nu pot fi folosite în alte scopuri fără confirmare expresă.

Copyright © 2021 Casada International GmbH.

Toate drepturile rezervate.