

 TM
Casada
healthcare

relax**my**way

CANOO V





< relaxmyway

De când a fost înființată compania în anul 2000, numele CASADA a însemnat produse de calitate superioară în sectorul wellness și fitness.

Azi, produsele CASADA sunt disponibile în 37 de țări. Ceea ce se distinge la produsele CASADA este continua lor dezvoltare, design-ul inconfundabil și concentrarea lor absolută asupra îmbunătățirii calității vieții precum și calitatea lor durabilă și excelentă.

Felicitări

Prin achiziționarea acestui dispozitiv de masaj ați demonstrat că aveți grijă de sănătatea dvs.

Pentru a putea beneficia de avantajele acestui dispozitiv pentru o perioadă lungă de timp, vă rugăm să citiți și să respectați toate instrucțiunile de siguranță.

Sperăm să vă bucurați pe deplin de dispozitiv dvs. personal **Canoo V**.

Cuprins

4	Instrucțiuni de siguranță
6	Echipament
7	Asamblare
8	Telecomandă
9	Specialități
10	Panou de control
12	Terminarea masajului
13	Întreținere
14	Depanare
14	Date tehnice
15	Declarație de conformitate UE
15	Condiții de garanție

Instrucțiuni de Siguranță



I. URMĂTOARELE PERSOANE AR TREBUI SĂ FOLOSEASCĂ DISPOZITIVUL NUMAI DUPĂ CONSULTAREA UNUI DOCTOR:

- Persoane care sunt ușor afectate de unde electromagnetice, cum ar fi utilizatorii de pacemaker sau de dispozitive similare
- Persoane care suferă de tumoare malignă
- Persoane cu afecțiuni ale inimii
- Femei la menstruație, însărcinate sau lăuze
- Persoană care suferă de diabet și are funcții senzoriale reduse
- Persoane cu leziuni ale pielii în partea corpului care se masează
- Persoane cu o temperatură corporală mai mare de 38°C (febră)
- Persoane care suferă de inflamație acută / răni în stadii avansate (cu simptome cum ar fi oboeală, tremurat, tensiune variabilă, etc.)
- Persoane care suferă de oboeală extremă
- Persoane care suferă de osteoporoză, contuzii sau întindere de mușchi, fracturi, etc.
- Persoane sensibile la căldură și durere
- Persoane care nu-și pot mișca în mod conștient picioarele
- Persoane cu picioare mai mici de 21cm nu ar trebui să folosească dispozitivul
- Persoane care nu sunt capabile să-și exprime clar gândurile și persoane imobilizate sau cu mișcare limitată nu ar trebui să folosească dispozitivul
- Persoane cărora li s-a interzis de către medic masajele nu ar trebui să folosească dispozitivul
- Persoane cu tromboză, anevrism sever, anevrism venos acut, toate tipurile de iritație de piele și boli de piele, etc.






II. VĂ RUGĂM SĂ RESPECTAȚI URMĂTOARELE CÂND UTILIZAȚI DISPOZITIVUL:

- Folosiți NUMAI fișa de conectare furnizată. (alte fișe pot duce la șocuri electrice, defectarea dispozitivului sau incendiu)
- Înainte de utilizare asigurați-vă că husa nu este deteriorată nicăieri. Dacă descoperiți o gaură, opriți-vă și nu utilizați dispozitivul și trimiteți-l imediat la reparat.
- Înainte de reglarea unghiului dispozitivului, asigurați-vă că nu există persoane, animale sau alte obstacole în imediata vecinătate. Există riscul de a fi prins în acesta.
- După utilizare fișa de conectare trebuie scoasă din priză și dispozitivul trebuie depozitat și asigurat astfel încât copiii mici sau animalele să nu se rănească.
- Pe durata folosirii nu stați pe un scaun mobil care s-ar putea de exemplu rostogoli. Acest lucru va asigura că nu vă răniți datorită scaunului mobil.
- Nu înfășurați cablul în jurul dispozitivului
- Manipularea incorectă și forțarea cablului de alimentare pot cauza daune și pot rezulta în incendiu, electroșocuri și accidente similare
- Nu se permite nimănui să efectueze schimbări, modificări sau reparații la acest produs cu excepția personalului tehnic corespunzător. În caz contrar garanția va fi automat nulă
- Asigurați-vă că fișa de conectare este scoasă pe durata curățării. Nu scoateți fișa de conectare cu mâini umede. Acest lucru poate duce la accidente severe.
- Dacă nu vă simțiți bine când folosiți dispozitivul, opriți tratamentul imediat.
- Masajul nu trebuie să depășească 2 x 30 min pe zi pentru fiecare parte a corpului. Corpul trebuie să poată să se relaxeze chiar și după masaj.
- Nu trageți de cablu când îl scoateți din priză. deconectați fișa de conectare. Ar trebui să îndepărtați pra-



Instrucțiuni de Siguranță

ful în mod regulat de pe fișă.

- Dacă folosiți dispozitivul după o perioadă mai lungă de neutilizare, asigurați-vă prima dată că dispozitivul funcționează normal și cablul este în ordine. Ar trebui să îndepărtați praful de pe acesta cat de des posibil.
- Depozitați dispozitivul într-un spațiu uscat. Praful și umezeala afectează dispozitivul pe perioade mai lungi și pot duce la electroșoc, defect sau incendiu.
- Acest dispozitiv de masaj este destinat numai pentru masaj de picioare. Nu îl utilizați pentru a masa capul, pieptul, stomacul, genunchiul, cotul sau alte părți similare.
- Nu trageți de cablu controlorului și nu-l înfășurați în jurul acestuia. Acest lucru poate duce la deteriorarea cablului.
- Nu lăsați copiii să folosească dispozitivul și nici în apropierea acestuia când este folosit.
- Nu stați jos sau în picioare pe dispozitiv. Acest lucru îi poate dăuna și cauza accidente.
- Nu călcați prea ferm pe dispozitivul de masaj.
- Nu puneți mâinile sau degetele în spațiul dintre bază și pereții laterali din interiorul aparatului. Există riscul de a vă strânge mâna înăuntru dacă unghiul aparatului este reglat sau dacă aparatul este într-o stare neblocată.
- Nu vă puneți picioarele așa cum se arată în imagine (acest lucru poate duce la accidente sau răni).
- Dacă cablul este deteriorat trebuie înlocuit de producător, reprezentantul de service sau de o agenție similară.
- Vă rugăm nu deteriorați, modificați, trageți, îndoiți sau înfășurați cablul de alimentare în mod excesiv (acest lucru poate deteriora cablul și poate duce la incendiu sau electroșoc).
- Dacă cablul sau fișa de conectare sunt deteriorate sau dacă priza este desfăcută, nu utilizați dispozitivul. (Acest lucru poate duce la electroșoc, scurtcircuit, incendii sau accidente similare)
- Nu lăsați ca dispozitivul să intre în contact cu apa în nici un fel
- Vă rugăm să nu folosiți dispozitivul în același timp cu alte dispozitive electronice (acest lucru poate duce la probleme/supraîncălzire a corpului).
- Vă rugăm să nu folosiți dispozitivul dacă este împachetat sau acoperit cu un prosop sau pătură (acest lucru poate duce la incendiu sau o temperatură interioară mai mare)
- Nu introduceți mâinile în spațiul dintre capetele de masaj, există pericolul de a vă strânge mâna
- Nu utilizați dispozitivul în baie sau într-o locație cu nivel ridicat de umiditate.
- Dacă cablul este deteriorat trebuie înlocuit de producător sau de comerciant pentru a evita alte daune.

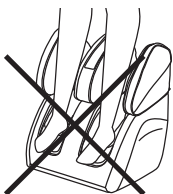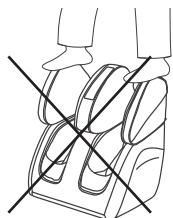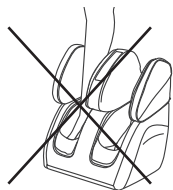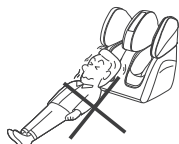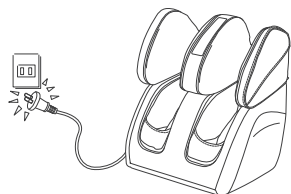


ECHIPAMENT | FUNCȚII

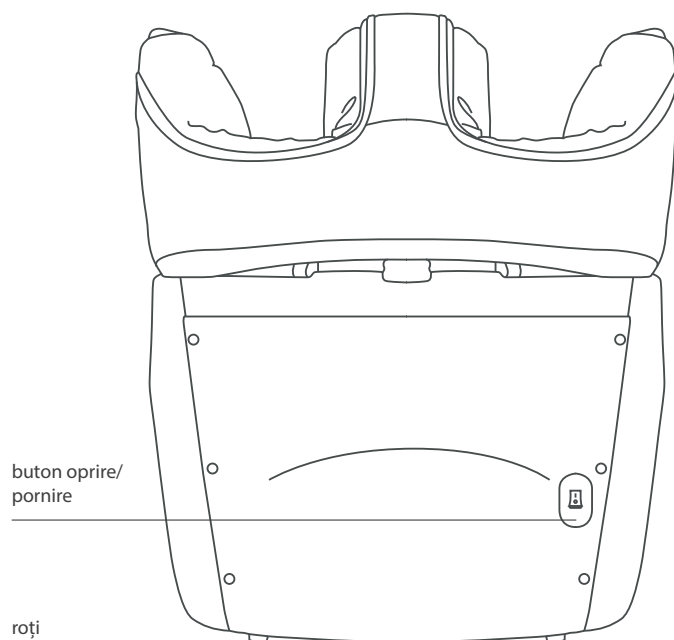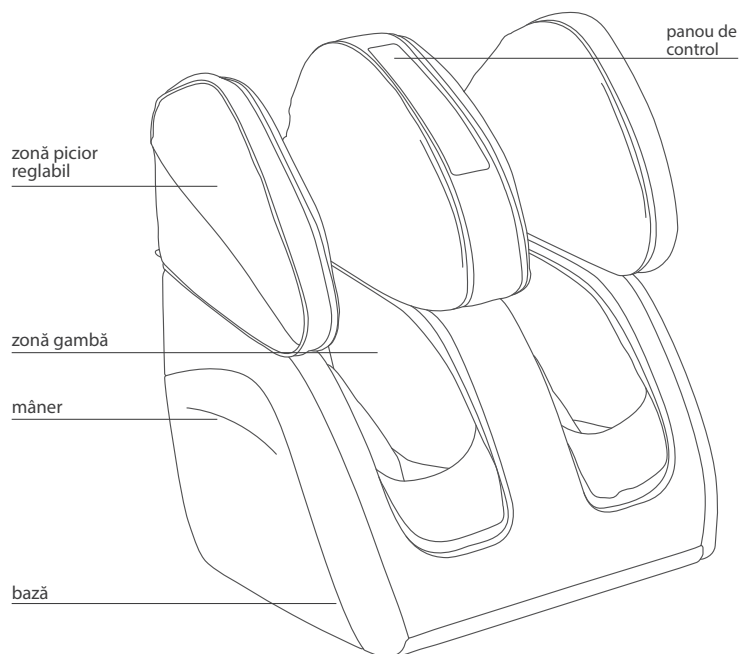



Asamblare

1. Plasați dispozitivul de masaj pe o suprafață uniformă. Poziționați dispozitivul la cel puțin 1 m de televizor, radio sau alte dispozitive AV.
2. Înainte de utilizare verificați husa să fie intactă. Dacă folosiți dispozitivul cu o husă defectă, există riscul unui electroșoc și de rănire..
3. Introduceți fișa de conectare complet în priză.
4. Stați jos pe o canapea, un scaun sau ceva asemănător și puneți-vă picioarele în dispozitivul de masaj. Alunecați-vă călcăiele cu partea din spate. Fixați dispozitivul de masaj la unghiul dorit.

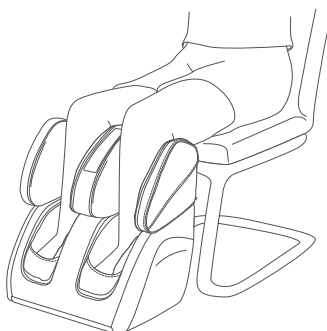

Nu stați jos pe un scaun cu roțile în timp ce utilizați dispozitivul. Acest lucru poate duce la rănire. Stați confortabil și mențineți o poziție normală a corpului.

5. Reglați zona piciorului: Zona superioară a piciorului poate fi reglată/scoasă pentru a trata genunchii și zona coapsei.

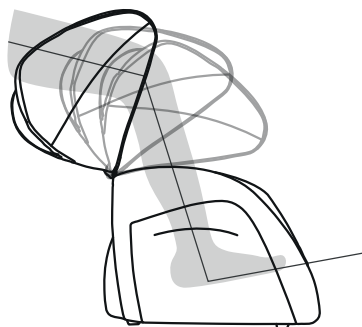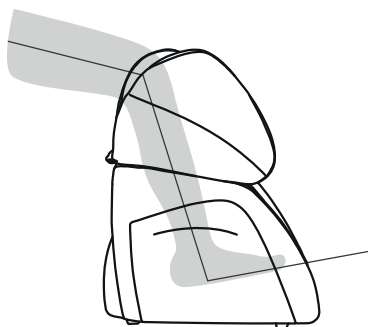

Folosiți-vă mâna pentru a scoate partea reglabilă a zonei pentru picior în sus. Unghiul poate fi reglat conform nevoilor dvs.

Telecomandă

TERAPIE DE ÎNCĂLZIRE

Funcție de încălzire pentru picioare și glezne

INTENSITATE

3 nivele

PRESIUNEA AERULUI

Zone selectabile

ROLE DE TALPĂ


3 moduri diferite selectabile

AUTO


Program automat

ON / OFF

Buton de pornire/oprire

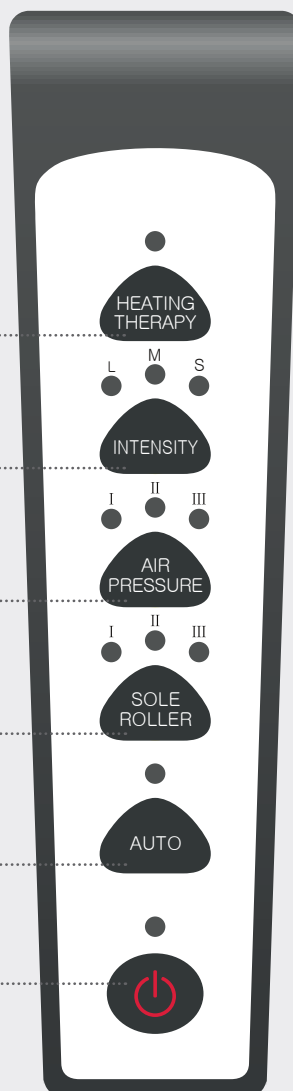

Specialități

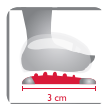


GUA SHA

Răzuirea GuaSha cu o presiune ușoară deschide vasele de sânge superficiale și stimulează circulația sângelui. GuaSha este deseori aplicat în combinație cu acupresiunea „puncte shu” pentru a aduce o stimulare suplimentară pentru a elibera simptomele de durere.



PUNCTE DE ACUPRESIUNE

Se masează puncte cheie de acupresiune pe gambe și glezne.

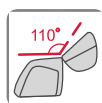

COAPSE

Partea superioară a Canoo V se îndoaie până la 110° și vă oferă alegerea unui masaj de acupresiune a genunchiului sau coapsei.



BRACHET DE SUPORT

Brachetul de suport înclinat montat pe partea frontală a aparatului permite Canoo V să fie reglat la un unghi de 20°.



TRANSPORTARE

Două role în spatele aparatului înseamnă că Canoo V poate fi transportat și poziționat ușor.



COMPRESIA AERULUI

Airbag-uri de ridicare și coborâre care au o mișcare de pompare care produce reflexe musculare naturale. Acestea sunt benefice în special pentru zona gambei și piciorului.



ÎNCĂLZIRE

Un efect de pătrundere în adâncime și radieră de căldură în care o persoană se poate relaxa perfect. Această funcție este benefică în special pentru tensiunea musculară datorită efectului de atingere în adâncime.



REFLEXOLOGIE

Reflexologia regenerează mușchii piciorului și are un efect de armonizare aproape a tuturor organelor corpului.




ROLE TALPĂ

Masaj de picioare de lux – chiar și viteza rolor pentru picioare poate fi reglată.

Panou de control

PANOU DE CONTROL

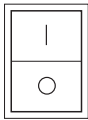Buton	Descriere
	Alimentare cu energie, întrerupător pornit/oprit
	Buton pornit/oprit Dacă apăsați pe butonul pornit/oprit se aprinde lumina pe ecran și dispozitivul e gata de utilizare. Tratamentul se termină prin apăsarea din nou pe buton. Dispozitivul este acum în mod de așteptare.



PROGRAM AUTOMAT

Buton	Descriere
	Programul automat al Canoo V reglat pentru optimă performanță vă oferă un masaj cu: • 44 de role de masaj a tălpii de diferite mărimi • 30 airbag-uri distribuite pe picioare, gambe, și fie pe zona genunchiului, fie a coapsei • funcție de încălzire opțională • 15 minute durată de rulare În timp ce este în modul AUTO, compresia aerului și intensitatea pot fi schimbate sau oprite dacă doriți. Luați aminte că funcția de intensitate funcționează numai în combinație cu presiunea aerului. Dacă funcțiile de presiune a aerului și intensitate rămân oprite pe durata modului AUTO, Canoo V va efectua numai masajul cu Role talpă. Dacă apăsați masajul Role talpă în timp ce e în mod AUTO, programul AUTO se va comuta automat pe mod manual. Lumina LED indică dacă modul a fost activat.

Panou de control

FUNCȚIONARE MANUALĂ

Pentru a utiliza manual aparatul, apăsați pe butonul AUTO până când lumina ledului este oprită, apoi selectați modul dorit sau o combinație a funcțiilor de masaj. Vă rugăm să luați aminte că durata recomandată de utilizare este de 15 minute.

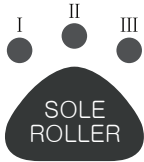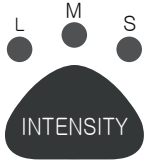Buton	Descriere
	Prin apăsarea acestui buton, aparatul va intra întotdeauna în unul din cele 3 moduri de masaj al piciorului GuaSha. 3 role de masaj cu 4 trasee, 2 role de masaj cu 4 bile rulante de diferite mărimi și 1 rolă cu 4 trasee și 3 bile de rulare diferite (pentru călcâi, mijlocul tălpii și degete de la picioare). Lumina ledului indică modul care a fost activat. Pentru a opri complet acest mod, apăsați de butonul de 4 ori. I ➔ Toate rolele de masaj în același timp II ➔ Toate rolele de masaj la intervale de 6x jumătăți de ture scurte + 2 ture complete lungi III ➔ Toate rolele de masaj la intervale de 5x jumătăți de ture scurte + 2 ture complete lungi
	Selectați pe care din cele 3 masaje cu presiune de aer le doriți. Lumina ledului indică modul care a fost activat. Pentru a opri complet acest mod, apăsați butonul de 4 ori. I ➔ Toate airbag-urile II ➔ Airbag-uri de picioare III ➔ Airbag-uri de coapsă
	Selectați pe care din cele 3 intensități de presiune a aerului diferite le doriți. Lumina ledului indică care intensitate a fost activată. Pentru a opri complet acest mod, apăsați butonul de 4 ori. L ➔ Ușor M ➔ Mediu S ➔ Puternic
	Funcția de încălzire pentru airbag-urile de coapsă și gleznă poate fi oprită atât în modul AUTO cît și în cel manual. Acest mod poate fi utilizat și fără activarea funcțiilor de masaj al tălpii sau de airbag. Luați aminte că durata recomandată de utilizare este de 15 minute. Lumina ledului indică dacă modul a fost activat.


Terminarea masajului

DISPOZITIV DE SIGURANȚĂ

Dacă se aplică prea multă presiune de către capetele de masaj acestea se opresc. Dacă acest lucru se întâmplă, vă rugăm deconectați fișa de conectare, așteptați 3 secunde și introduceți din fișa în priză. apoi puteți folosi dispozitivul din nou.

Buton	Descriere
	Apăsați butonul pornire/oprire pentru a termina masajul.
 WARNING	Dispozitivul trebuie să fie deconectat de la sursa de alimentare după fiecare utilizare. Dispozitivul de masaj trebuie să fie pus înapoi în poziția sa inițială și depozitat. Dacă nu folosiți dispozitivul pe perioade lungi de timp asigurați-vă că deconectați fișa din priză.

Aduceți dispozitivul de masaj înapoi în poziția sa inițială.

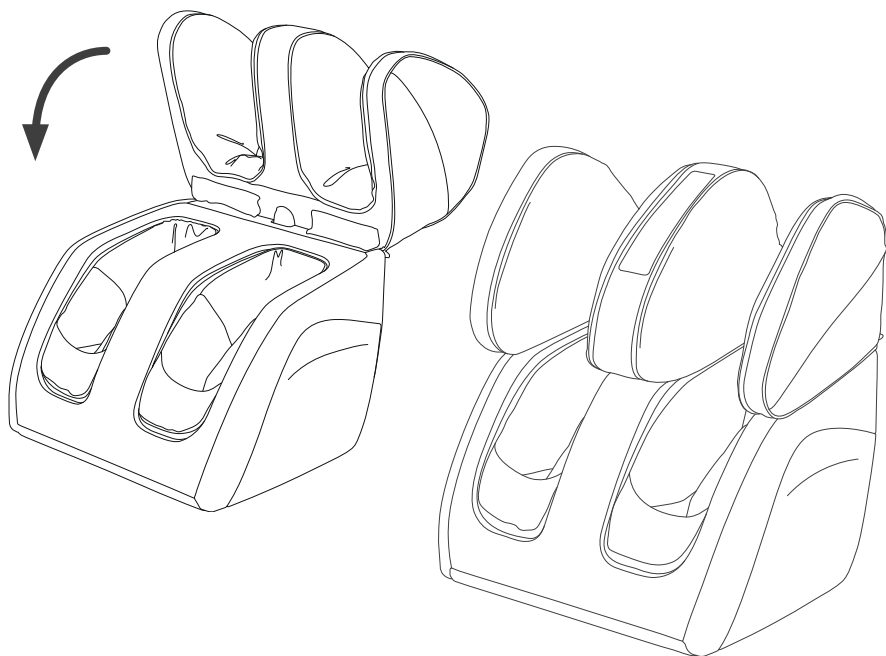


Întreținere



- Fișa de conectare trebuie scoasă din priză pentru curățare și întreținere
- Nu atingeți fișa de conectare cu mâini umede
- Nu folosiți, benzen, dizolvant, albitor, etc. Acest lucru poate duce schimbarea culorii, deformare sau deteriorare.
- Curățați cu grijă husa. Dacă aceasta pare a fi deteriorată nu o mai folosiți. Contactați serviciul nostru clienți pentru a evita leziuni
- NU utilizați NICIODATĂ dispozitivul fără husă!!
- Nu lăsați copiii mici în vecinătatea aparatului după ce scoateți husa. Acest lucru poate avea ca rezultat accidente sau leziuni

- Folosiți un agent de curățat neutru de o concentrația mai mică și un material moale. Acestea se utilizează la curățarea dispozitivului. Utilizați foarte puțin lichid.
- Folosiți-l pentru a șterge suprafața și apoi ștergeți cu un material uscat.
- Scoaterea și spălarea husei.

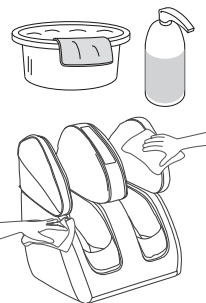


[1] Prima dată, trageți părțile reglabile din zona piciorului în sus.

[2] Localizați fermoarul husei.

[3] Deschideți-l în direcția săgeții și scoateți husa.

[4] Folosiți husa spălată numai după ce s-a uscat.

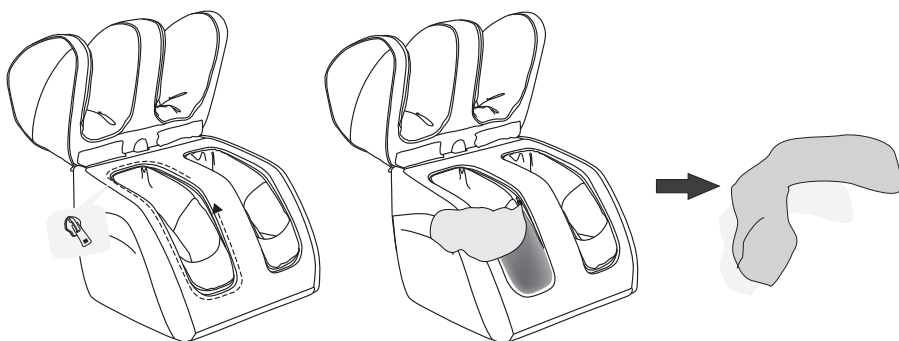

Depanare

Dacă următoarele informații nu vă ajută să rezolvați problema, vă rugăm contactați centrul nostru de serviciu clienți.

Problemă	Analiza defecțiunii	Soluție
Dispozitivul nu funcționează	Fîșa de conectare nu se conectează.	Asigurați-vă că tensiunea solicitată pentru dispozitiv se potrivește cu sursa de alimentare a prizei și inserați fîșa încă o dată.
	După 15 min dispozitivul trece în modul de așteptare.	Dacă doriți un masaj din nou, apăsați pe butonul pornire/oprire încă o dată.
	Dacă folosiți dispozitivul timp de 30 minute fără întrerupere, atunci un mecanism întrerupe masajul pentru ca dispozitivul să nu se supraîncălzească.	Dacă doriți să folosiți dispozitivul încă o dată, atunci scoateți cablul din priză și lăsați dispozitivul să se răcească timp de 60 minute.
	Obiecte grele sunt deasupra dispozitivului.	Deconectați fîșa de conectare și apoi conectați din nou după ce ați îndepărtat obiectele grele.
Dispozitivul devine foarte fierbinte	Masajul dvs. cu dispozitivul a durat mai mult de 30 minute.	Deconectați cablul din priză și lăsați dispozitivul să se răcească. Vă rugăm deconectați fîșa de conectare după fiecare utilizare.
Dispozitivul face un zgomot	Acest zgomot vine de la mecanica componentelor funcționabile.	Acest zgomot este normal și nu indică o defecțiune.

Date tehnice Canoo V

Dimensiuni:	45 x 54 x 60 cm
Greutate:	24,5 kg netto/ 27 kg brut
Tensiune:	AC 110-120 V ~ 60 Hz AC 220-240 V ~ 50/60 Hz
Capacitate nominală:	max. 120 Watt
Durată automată:	15 minute
Certificate:	



Declarație de conformitate UE

Este conform Standardelor de Reglementare Europeană, a Directivelor EMC 2014/30/UE și LVD 2014/35/UE

Condiții de garanție

Comerciantul garantează o perioadă de garanție legală pentru produsul descris pe verso. Garanția se aplică de la data achiziționării. Data achiziționării trebuie arătată pe dovada de cumpărare. Comerciantul va repara sau înlocui gratuit produsele care sunt înregistrate în Germania în care s-a constatat un defect. Acest lucru nu include părțile supuse uzurii cum ar fi husele din materiale. Cerința este ca dispozitivul defect să fie trimis cu dovada de cumpărare înainte de expirarea perioadei de garanție.

Reclamația de garanție nu se va aplica dacă se constată că defectul a fost cauzat de ex. de influențe externe sau ca rezultat al unei reparații sau modificări care nu a fost efectuată de producător sau de un dealer autorizat. Garanția din partea comerciantului este limitată la repararea sau schimbarea produsului. În cadrul acestei garanții, producătorul sau comerciantul nu-și va asuma nici o răspundere ulterioară și nu este responsabil pentru daunele care s-au ivit ca rezultat al neconformității cu instrucțiunile de utilizare și/sau utilizare necorespunzătoare a produsului.

Dacă la examinarea produsului de către producător se constată că cererea de garanție nu se referă la un defect acoperit de garanție sau că perioada de garanție a expirat, clientul trebuie să suporte costurile de inspecție și reparație.

Notificare legală: Nimic din acest conținut nu are valoare de vindecare. Diagnosticul și tratamentul pentru boli și alte afecțiuni fizice necesită tratamentul unui doctor, medic de terapie alternativă sau terapeut. Declarațiile sunt exclusiv informative și nu trebuie utilizate ca înlocuire a tratamentului medical. Fiecare utilizator este instruit să-și evalueze cu grijă situația și, unde e cazul, să consulte un medic specialist pentru a determina dacă este aplicarea dispozitivului este potrivită în cazul său specific. Fiecare utilizare sau terapie este efectuată pe riscul său utilizatorului. Ne disociem de orice promisiuni sau declarații de vindecare.

Casada International GmbH
Obermeiers Feld 3
33104 Paderborn, Germany
info@casada.com
www.casada.com

Imaginile și textele copyright se supun drepturilor de autor ale Casada International GmbH și nu pot fi folosite în alte scopuri fără confirmare expresă.
Copyright © 2018 CASADA International GmbH.
Toate drepturile rezervate.

