



CANOO V



< relaxează-te în felul meu

De când a fost înființată compania în anul 2000, numele CASADA a însemnat produse de calitate superioară în sectorul wellness și fitness.

Azi, produsele CASADA sunt disponibile în 37 de țări. Ceea ce se distinge la produsele CASADA este continua lor dezvoltare, design-ul inconfundabil și concentrarea lor absolută asupra îmbunătățirii calității vieții precum și calitatea lor durabilă și excelentă.

FELICITĂRI

Prin achiziționarea acestui dispozitiv de masaj ați demonstrat că aveți grijă de sănătatea dvs.

Pentru a putea beneficia de avantajele acestui dispozitiv de masaj pentru o perioadă lungă de timp, vă rugăm să citiți și să respectați toate instrucțiunile de siguranță.

Sperăm să vă bucurați pe deplin de aparatul dvs. personal Canoo V.

CUPRINS

Instrucțiuni de siguranță

Echipament

Asamblare

Telecomandă

Particularități

Panou de control

Terminarea masajului

Întreținere

Depanare

Date tehnice

Declarație de conformitate UE

Condiții de garanție

INSTRUCȚIUNI DE SIGURANȚĂ



I. Următoarele persoane ar trebui să folosească dispozitivul numai după consultarea unui doctor:

- Persoanele care sunt ușor afectate de unde electromagnetice, cum ar fi utilizatorii de stimulator cardiac sau de dispozitive similare
- Persoanele care suferă de o tumoare malignă
- Persoanele cu afecțiuni ale inimii
- Femeile la menstră, însărcinate sau lăuze
- Persoanele care suferă de diabet și au funcții senzoriale reduse
- Persoanele cu leziuni cutanate în zona corpului care se masează
- Persoanele cu o temperatură corporală mai mare de 38°C (febră)
- Persoanele care suferă de inflamație acută / răni în stadii avansate (cu simptome cum ar fi oboseală, tremurat, tensiune variabilă, etc.)
- Persoanele care suferă de oboseală extremă/epuizare
- Persoanele care suferă de osteoporoză, contuzii sau întindere de mușchi, fracturi, etc.
- Persoanele sensibile la căldură și durere
- Persoanele care nu-și pot mișca în mod conștient picioarele
- Persoanele cu măsura la picior mai mică de 21 cm nu ar trebui să folosească dispozitivul

- Persoanele care nu sunt capabile să-și exprime clar gândurile și persoanele imobilizate sau cu mișcare limitată nu ar trebui să folosească dispozitivul
- Persoanele cărora li s-a interzis de către medic masajele nu ar trebui să folosească dispozitivul
- Persoane cu tromboză, anevrism grav, anevrism venos acut, toate tipurile de iritație de piele și boli de piele, etc.


II. VĂ RUGĂM SĂ RESPECTAȚI URMĂTOARELE CÂND UTILIZAȚI DISPOZITIVUL

- Folosiți NUMAI ștecherul furnizat. (alte fișe pot duce la șocuri electrice, defectarea dispozitivului sau incendiu)
- Înainte de utilizare asigurați-vă că materialul care acoperă dispozitivul nu este deteriorat nicăieri. Dacă descoperiți o gaură, opriți-vă și nu utilizați dispozitivul și trimiteți-l imediat la reparat.
- Înainte de reglarea unghiului dispozitivului, asigurați-vă că nu există persoane, animale sau alte obstacole în imediata vecinătate. Există riscul de a fi prins sub acesta.
- După utilizare ștecherul trebuie scos din priză și dispozitivul trebuie depozitat și asigurat astfel încât copiii mici sau animalele de casă să nu se rănească.
- Pe durata folosirii nu stați pe un scaun mobil care s-ar putea, de exemplu rostogoli. Acest lucru va preveni să nu vă răniți datorită scaunului mobil.
- Nu înfășurați cablul de alimentare în jurul dispozitivului
- Manipularea incorectă și forțarea cablului de alimentare pot cauza daune și pot rezulta în incendiu, electrocutări și alte accidente similare
- Nu se permite nimănui să efectueze schimbări, modificări sau reparații la acest produs, cu excepția personalului tehnic corespunzător. În caz contrar garanția va deveni automat nulă
- Asigurați-vă că ștecherul este scos pe durata curățării. Nu scoateți ștecherul cu mâini umede. Acest lucru poate duce la accidente grave.
- Dacă nu vă simțiți bine când folosiți dispozitivul, opriți tratamentul imediat
- Masajul nu trebuie să depășească 2 x 30 min pe zi pentru fiecare parte a corpului. Corpul trebuie să poată să se relaxeze chiar și după masaj.
- Nu trageți de cablu când îl scoateți din priză. Deconectați ștecherul. De asemenea, ar trebui să îndepărtați praful în mod regulat de pe ștecher.
- Dacă folosiți dispozitivul după o perioadă mai lungă de neutilizare, asigurați-vă prima dată că dispozitivul funcționează normal și cablul este în ordine. Ar trebui să îndepărtați praful de pe acesta cat de des posibil.
- Depozitați dispozitivul într-un spațiu uscat. Praful și umezeala afectează dispozitivul pe





perioade mai lungi și pot duce la electrocutare, defect sau incendiu.

- Acest dispozitiv de masaj este destinat numai pentru masaj de picioare. Nu îl utilizați pentru a masa capul, pieptul, stomacul, genunchiul, cotul sau alte părți similare.
- Nu trageți de cablu telecomenzii și nu-l înfășurați în jurul acestuia. Acest lucru poate duce la deteriorarea cablului.
- Nu lăsați copiii să folosească dispozitivul, nici în apropierea acestuia când este folosit.
- Nu stați jos sau în picioare pe dispozitiv. Acest lucru îi poate dăuna și cauza accidente
- Nu călcați prea ferm pe dispozitiv de masaj.
- Nu puneți mâinile sau degetele în spațiul dintre bază și peretele lateral din interiorul aparatului. Există riscul de a vă strânge mâna înăuntru dacă unghiul aparatului este reglat sau dacă aparatul este într-o poziție neblocată.
- Nu vă puneți picioarele așa cum se arată în imagine (acest lucru poate duce la accidente sau răni).
- În cazul în care cablul de alimentare este deteriorat trebuie înlocuit de producător, reprezentantul de service sau de o agenție similară.
- Vă rugăm nu deteriorați, modificați, trageți, îndoiți sau înfășurați cablul de alimentare în mod excesiv (acest lucru poate deteriora cablul și poate duce la incendiu sau electrocutare).
- În cazul în care cablul sau ștecherul sunt deteriorate sau dacă priza este desfăcută, nu utilizați dispozitivul. Acest lucru poate conduce la electrocutare, scurtcircuite, incendii sau accidente similare.
- Nu lăsați ca dispozitivul să intre în contact cu apa în nici un fel
- Vă rugăm să nu folosiți dispozitivul în același timp cu alte dispozitive electronice (acest lucru poate duce la probleme/supraîncărcare a corpului).
- Vă rugăm să nu folosiți dispozitivul dacă este împachetat sau acoperit cu un prosop sau pătură (acest lucru poate duce la incendiu sau o temperatură interioară mai mare)
- Nu introduceți mâinile în spațiul dintre capetele de masaj, există pericolul de a vă strânge mâna
- Nu utilizați dispozitivul în baie sau într-un loc cu nivel ridicat de umiditate.
- În cazul în care cablul de alimentare este deteriorat trebuie înlocuit de producător sau de comerciant pentru a evita alte daune.

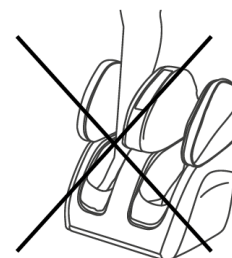


ECHIPAMENT

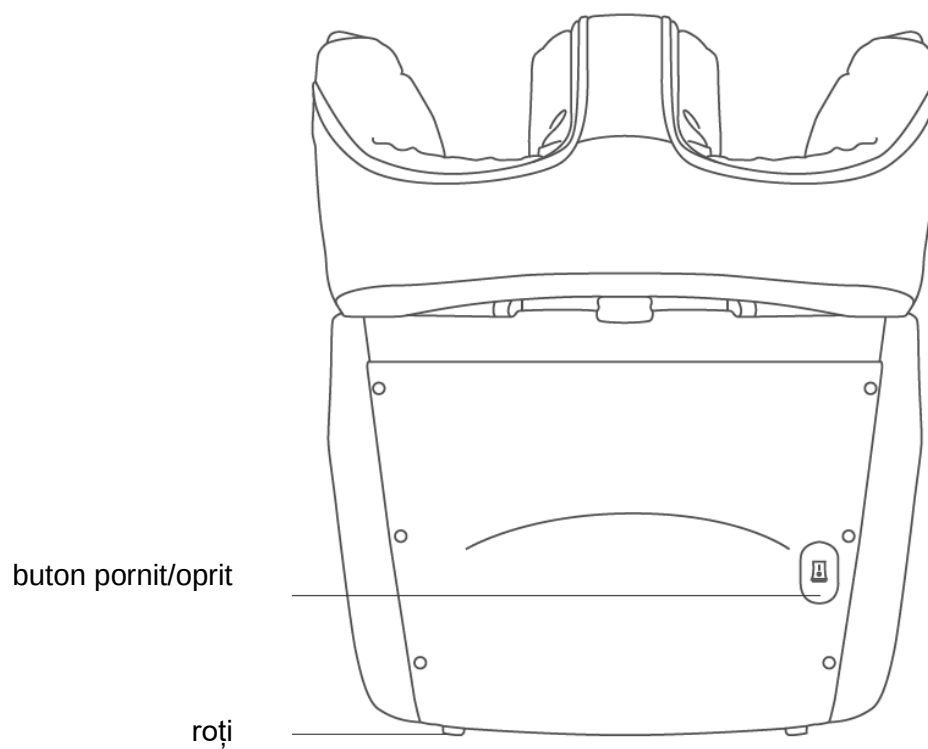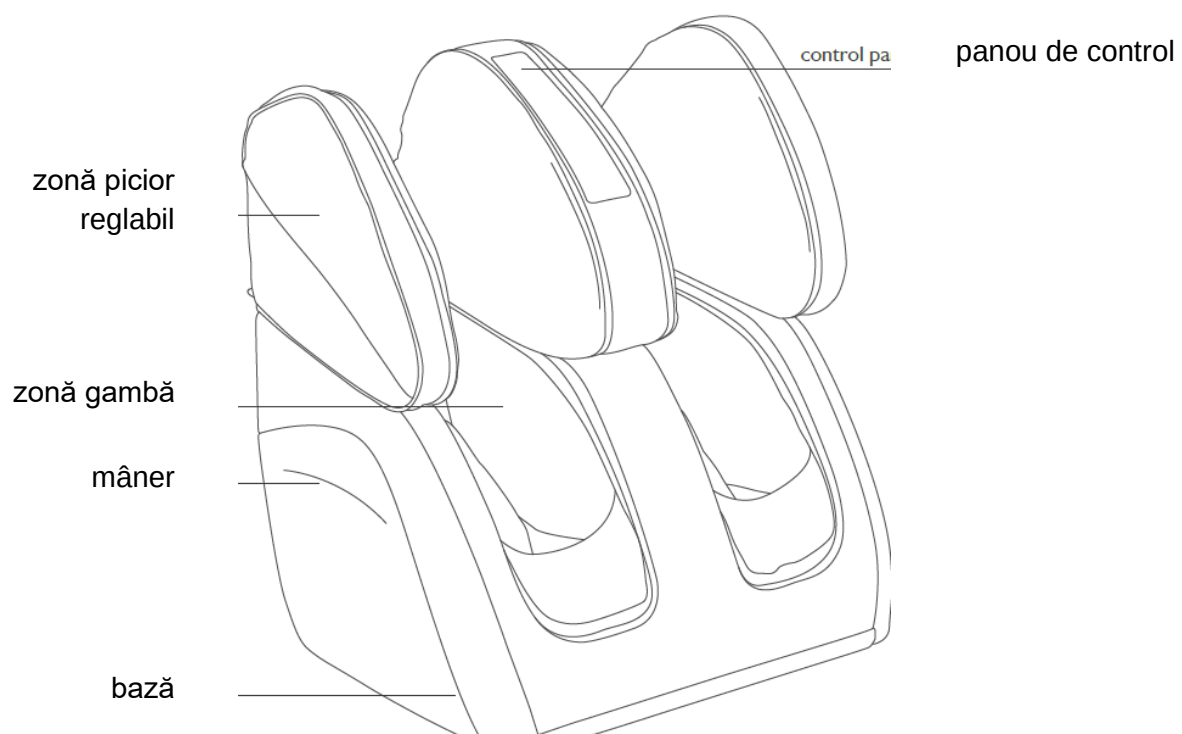



ASAMBLARE

1. Plasați dispozitivul de masaj pe o suprafață uniformă. Poziționați dispozitivul la cel puțin 1 m de televizor, radio sau alte dispozitive audiovizuale.
2. Înainte de utilizare verificați husa să fie intactă. Dacă folosiți dispozitivul cu o husă defectă, există riscul de electrocutare și de rănire.
3. Introduceți ștecherul complet în priză
4. Stați jos pe o canapea, un scaun sau ceva asemănător și puneți-vă picioarele în dispozitivul de masaj. Introduceți călcâiele alunecând cu spate. Setați dispozitivul de masaj la unghiul dorit.

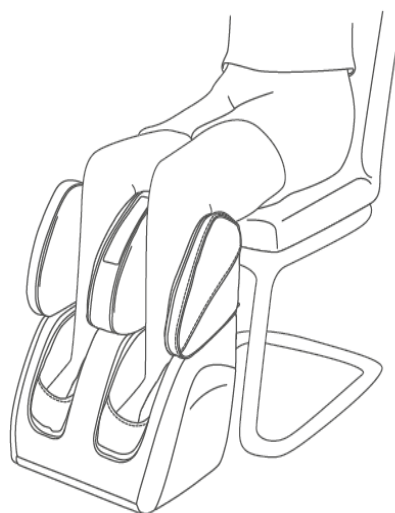

Nu stați jos pe un scaun cu roțile în timp ce utilizați dispozitivul. Acest lucru poate rezulta în rănire. Stați confortabil și mențineți o poziție normală a corpului.


5. Reglați zona piciorului: Zona superioară a piciorului poate fi reglată/scoasă pentru a trata genunchii și zona coapsei.

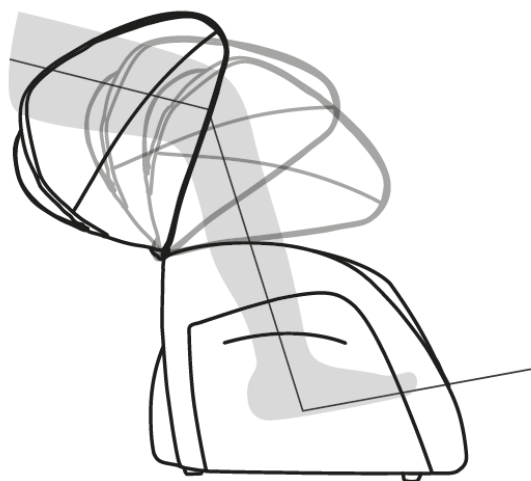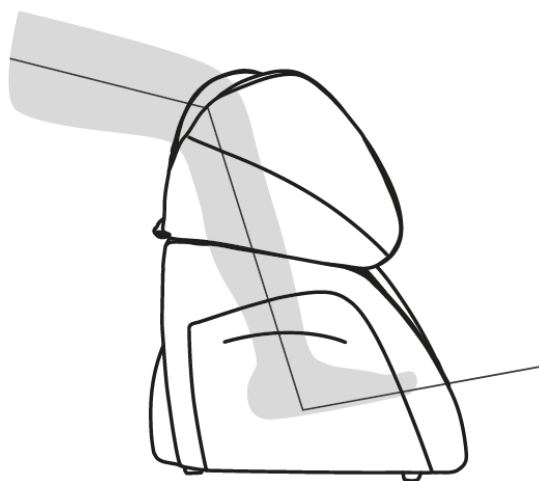

Folosiți-vă mâna pentru a scoate partea reglabilă a zonei pentru picior în sus. Unghiul poate fi reglat conform nevoilor dvs.

TELECOMANDĂ

TERAPIE DE ÎNCĂLZIRE	
Funcție de încălzire pentru picioare și glezne	
INTENSITATE	
3 nivele	
PRESIUNEA AERULUI	
zone selectabile	
ROLE DE TALPĂ	
3 moduri diferite selectabile	
AUTO	
program automat	
ON/OFF	
buton de pornire/oprire	

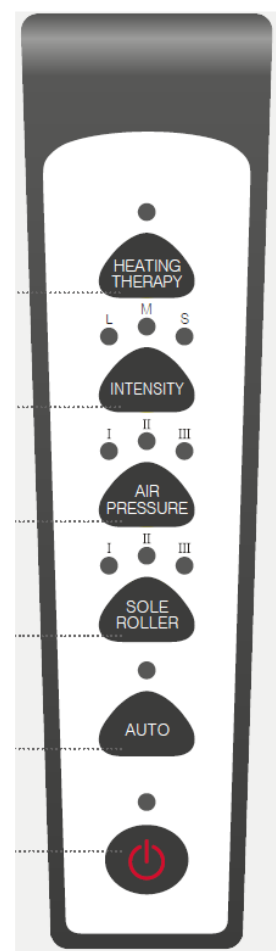

PARTICULARITĂȚI




GUA SHA

Tehnica de răzuire GuaSha cu presiune ușoară, deschide vasele de sânge superficiale și stimulează circulația sanguină. GuaSha se aplică deseori în combinație cu acupresura „puncte Shu” pentru o stimulare suplimentară în ușurarea simptomelor dureroase



PUNCTE DE ACUPRESURĂ

Se masează punctele cheie de acupresură pe gambe și glezne.

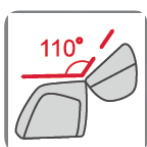

COAPSE

Partea superioară a Canoo V se îndoaie până la 110° și vă permite să alegeți un masaj de acupresiune a genunchiului sau coapsei.



BRACHET DE SUPORT

Brachetul de suport înclinat montat pe partea frontală a aparatului permite Canoo V să fie reglat la un unghi de 20°




TRANSPORTARE

Cele două role din spatele aparatului înseamnă că aparatul Canoo V poate fi transportat și poziționat ușor



COMPRIMARE AER

Pernele de aer care se ridică și coboară au o mișcare de pompare care produce reflexe musculare naturale. Aceasta este benefică pentru regiunea gambei și piciorului

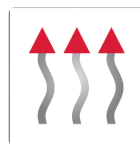

ÎNCĂLZIRE

Un efect de pătrundere în adâncime și radieră de căldură în care o persoană se poate relaxa perfect. Această funcție este benefică în special pentru tensiunea musculară datorită efectului de atingere în adâncime



REFLEXOLOGIE

Reflexologia regenerează mușchii piciorului și are un efect armonizant asupra majorității organelor din corpul dvs.




ROLĂ TALPĂ

Masaj de picioare de lux – chiar și viteza rolor se poate regla.

PANOU DE CONTROL

FUNCȚIONARE

Buton

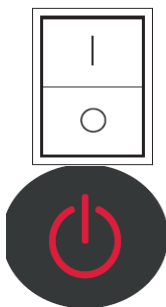

Descriere

Alimentare cu energie, întrerupător pornit/oprit

Buton pornit/oprit

Dacă apăsați pe butonul pornit/oprit se aprinde lumina pe ecran și dispozitivul e gata de utilizare. Tratamentul se termină prin apăsarea din nou pe buton. Dispozitivul este acum în mod de așteptare.

PROGRAM AUTOMAT

Buton



Descriere

Programul automat al Canoo V reglat pentru optimă performanță vă oferă un masaj cu:

- 44 de role de masaj a tălpii de diferite mărimi
- 30 airbag-uri distribuite pe picioare, gambe, și fie pe zona genunchiului, fie a coapsei
- funcție de încălzire opțională
- 15 minute durată de funcționare

În timp ce este în modul AUTO, comprimarea aerului și intensitatea pot fi schimbate sau oprite dacă doriți. Luați aminte că funcția de intensitate funcționează numai în combinație cu presiunea aerului.

Dacă funcțiile de presiune a aerului și intensitate rămân oprite pe durata modului AUTO, aparatul va efectua numai masajul cu Role la talpă.


Dacă apăsați masajul Role talpă în timp ce e în mod AUTO, programul AUTO se va comuta automat pe mod manual.

Lumina LED indică dacă modul a fost activat.

FUNCȚIONARE MANUALĂ

Pentru a utiliza manual aparatul, apăsați pe butonul AUTO până când lumina ledului este oprită, apoi selectați modul dorit sau o combinație a funcțiilor de masaj. Vă rugăm să luați aminte că durata recomandată de utilizare este de 15 minute.

Buton

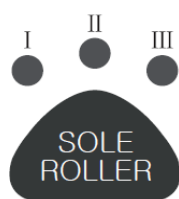

Descriere

Prin apăsarea acestui buton, aparatul va intra întotdeauna în unul din cele 3 moduri de masaj GuaSha al piciorului.

3 role de masaj cu 4 trasee, 2 role de masaj cu 4 bile rulante de diferite mărimi și 1 rolă cu 4 trasee și 3 bile de rulare diferite (pentru călcâi, mijlocul tălpii și degete de la picioare).


Lumina ledului indică modul care a fost activat. Pentru a opri complet acest mod, apăsați butonul de 4 ori.

- I → Toate rolele de masaj în același timp.
- II → Toate rolele de masaj la intervale de 6x jumătăți de ture scurte + 2 ture complete lungi
- III → Toate rolele de masaj la intervale de 5x jumătăți de ture scurte + 2 ture complete lungi



Selectați pe care din cele 3 masaje cu presiune de aer le doriți. Lumina ledului indică modul care a fost activat. Pentru a opri complet acest mod, apăsați butonul de 4 ori.

- I → Toate airbag-urile
- II → Perne de aer de picioare
- III → Perne de aer de coapsă

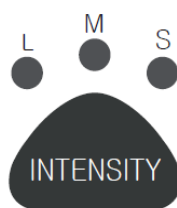

Selectați pe care din cele 3 intensități diferite de presiune a aerului le doriți. Lumina ledului indică care intensitate a fost activată. Pentru a opri complet acest mod, apăsați butonul de 4 ori.

L → Ușor

M → Mediu

S → Puternic



Funcția de încălzire pentru pernele de aer pentru coapsă și gleznă poate fi oprită atât în modul AUTO cât și în cel manual. Acest mod poate fi utilizat și fără activarea funcțiilor de masaj al tălpii sau funcția cu perne de aer.

Luați aminte că durata recomandată de utilizare este de 15 minute. Lumina ledului indică dacă modul a fost activat.

TERMINAREA MASAJULUI

DISPOZITIV DE SIGURANȚĂ

Dacă se aplică prea multă presiune pe capetele de masaj acestea se opresc. Dacă acest lucru se întâmplă, vă rugăm deconectați ștecherul, așteptați 3 secunde și introduceți din nou ștecherul în priză. Apoi puteți folosi dispozitivul din nou.

Buton




Descriere

Apăsați butonul pornire/oprire pentru a termina masajul



Dispozitivul trebuie să fie deconectat de la sursa de alimentare după fiecare utilizare. Dispozitivul de masaj trebuie să fie pus înapoi în poziția sa inițială și depozitat. Dacă nu folosiți dispozitivul pe perioade lungi de timp asigurați-vă că-l deconectați de la priză.

Aduceți dispozitivul de masaj înapoi în poziția sa inițială.


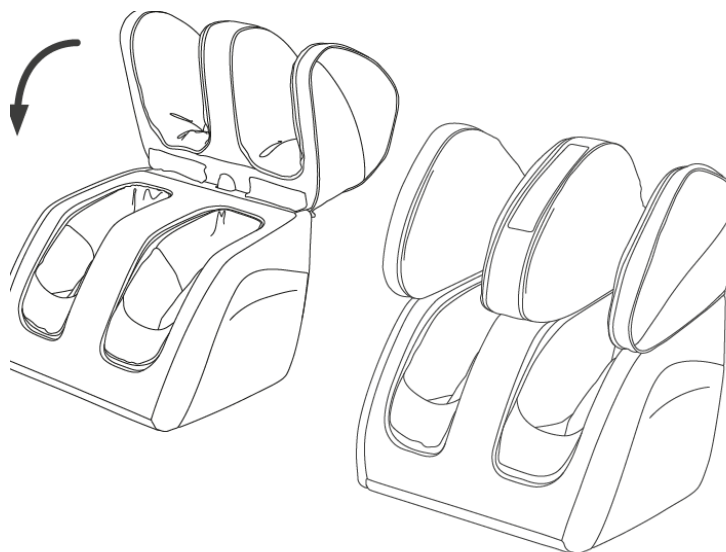


ÎNTREȚINERE



- Ștecherul trebuie scos din priză pentru curățare și întreținere
- Nu atingeți ștecherul cu mâini umede
- Nu folosiți, benzen, dizolvant, albitor, etc. Acest lucru poate duce schimbarea culorii, deformare sau deteriorare.
- Curățați cu grijă materialul. Dacă acesta pare a fi deteriorat nu-l mai folosiți. Contactați serviciul nostru clienți pentru a evita leziuni
- NU utilizați NICIODATĂ dispozitivul fără husa care-l acoperă!!
- Nu lăsați copiii mici în vecinătatea aparatului după ce scoateți husa. Acest lucru poate avea ca rezultat accidente sau leziuni

- Folosiți un agent de curățat neutru de o concentrația mai mică și un material moale. Acestea se pot utiliza la curățarea dispozitivului. Utilizați foarte puțin lichid!
- Ștergeți cu acestea suprafața și apoi ștergeți cu un material uscat
- Scoaterea și spălarea husei

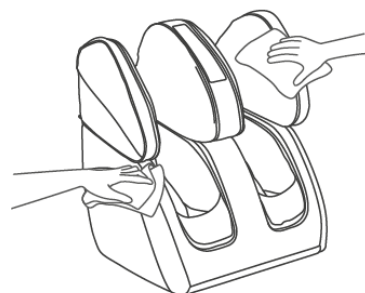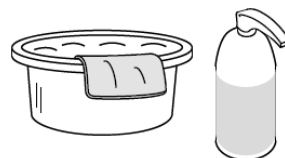


[1] Prima dată, trageți părțile reglabile din zona piciorului în sus

[2] Localizați fermoarul husei

[3] Deschideți-l în direcția săgeții și scoateți husa

[4] Folosiți husa spălată numai după ce s-a uscat

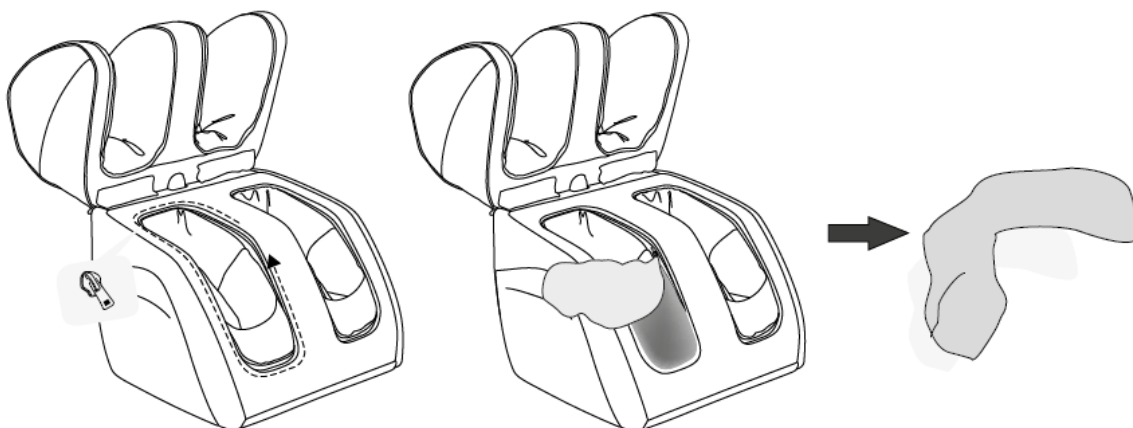

DEPANARE

Dacă următoarele informații nu vă ajută să rezolvați problema, vă rugăm contactați centrul nostru de serviciu clienți.

Problemă	Analiza defecțiunii	Soluție
Dispozitivul nu funcționează	Ștecherul nu se conectează	Asigurați-vă că tensiunea solicitată pentru dispozitiv se potrivește cu sursa de alimentare a prizei și introduceți ștecherul încă o dată
	După 15 min dispozitivul trece în modul de așteptare	Dacă doriți din nou un masaj, apăsați pe butonul pornire/oprire încă o dată
	Dacă folosiți dispozitivul timp de 30 minute fără întreruperi, atunci un mecanism întrerupe masajul pentru ca dispozitivul să nu se supraîncălzească	Dacă doriți să folosiți dispozitivul încă o dată, atunci scoateți cablul de alimentare și lăsați dispozitivul să se răcească timp de 60 minute
	Obiecte grele sunt deasupra dispozitivului	Scoateți ștecherul din priză, îndepărtați obiectele grele de pe dispozitiv, și apoi introduceți-l din nou în priză
Dispozitivul devine foarte fierbinte	Masajul dvs. cu dispozitivul a durat mai mult de 30 minute	Scoateți ștecherul din priză și lăsați dispozitivul să se răcească. Vă rugăm să scoateți ștecherul din priză după fiecare utilizare.
Dispozitivul face un zgomot	Acest zgomot vine de la mecanica componentelor funcționabile.	Acest zgomot este normal și nu indică o defecțiune

DATE TEHNICE CANOO IV

Dimensiuni:	45 x 54 x 60 cm
Greutate:	24,5 kg net / 27 kg brut
Tensiune:	AC 110-120 V ~ 60 Hz AC 220-240 V ~ 50/60 Hz
Capacitate nominală:	max. 120 Watt
Durată automată de funcționare:	15 minute
Certificate:	   

DECLARAȚIE DE CONFORMITATE UE

Aparatul este conform Directivelor Europene EMC 2014/30/UE (compatibilitate electromagnetică) și LVD 2014/35/UE (joasă tensiune).

CONDIȚII DE GARANȚIE

Comerciantul garantează o perioadă de garanție legală pentru produsul descris pe verso. Garanția se aplică de la data achiziționării. Data achiziției se demonstrează cu documentul de cumpărare. Comerciantul va repara sau înlocui gratuit produsele care sunt înregistrate în Germania la care s-a constatat un defect. Acest lucru nu include părțile supuse uzurii cum ar fi husele din materiale. Pentru aceasta trebuie să returnați aparatul defect împreună cu dovada de cumpărare înainte de expirarea perioadei de garanție.

Cererea de garanție nu se va aplica dacă se stabilește că defectul a fost cauzat de ex. de influențe externe sau ca rezultat al unei reparații sau modificări care nu a fost efectuată de producător sau de un dealer autorizat. Garanția din partea comerciantului este limitată la repararea sau schimbarea produsului. În cadrul acestei garanții, producătorul sau comerciantul nu-și va asuma nici o răspundere ulterioară și nu e responsabil de daunele ivite ca rezultat al neconformității cu instrucțiunile de utilizare și/sau utilizarea necorespunzătoare a produsului.

Dacă la inspecția produsului de către producător se constată că cererea de garanție nu se referă la un defect acoperit de garanție sau că perioada de garanție a expirat, costurile de inspecție și reparație sunt suportate de client.

Notificare legală: Nimic din conținutul manualului nu are valoare de vindecare. Diagnosticul și tratamentul bolilor și altor afecțiuni fizice necesită tratament din partea unui doctor, medic de terapie alternativă sau terapeut. Declarațiile sunt exclusiv informative și nu trebuie utilizate ca înlocuitor al tratamentului medical profesional. Fiecare utilizator este instruit să-și evalueze cu grijă situația și, unde e cazul, să consulte un medic specialist pentru a determina dacă aplicarea aparatului este potrivită în cazul său specific. Fiecare utilizare sau terapie este efectuată pe riscul utilizatorului. Ne disociem de orice promisiuni sau declarații de vindecare.

Casada International GmbH
Obermeiers Feld 3
33104 Paderborn, Germania
info@casada.com
www.casada.com

Imaginile și textele copyright se supun drepturilor de autor ale Casada International GmbH și nu pot fi folosite în alte scopuri fără confirmare expresă.

Copyright © 2016 Casada International GmbH.

Toate drepturile rezervate.